

# Logic Purifier Lo



## Purifier<sup>®</sup> Logic<sup>™</sup> 系列二级生物安全柜

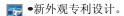

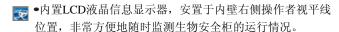

- **长** "Filter Life Remaining"条线图可显示HEPA滤膜的寿命百分比。
  - ▶ LCD显示器可详细显示生物安全柜运行情况,如报警时出现 "sash too high"悬窗开启过高的文字提示。
  - 查→当滤膜寿命少于20%,或气流进气口被阻塞,或排风口被阻塞, LCD显示屏将提示警报。
- ◆外排定风量设计:具有电子整流功能的风机组成的过滤器监控系统,通过程序直接获取准确的气体流量数据,自动进行必要的调整。
- ●内置 ECM 电子对抗系统使功率消耗减少 50%,降低了生物安全柜工作时产生的热量和噪音,从而增强了 HEPA 或 ULPA 滤膜的功效。
  - ●Smart-Start<sup>™</sup>系统,可设置程序当悬窗打开或关闭时自动启动 或关闭风机、荧光灯、紫外灯。
  - ●Night-Smart<sup>™</sup> 系统,在生物安全柜不使用悬窗完全关闭期间,风机进行低速运行保持柜体内部清洁。
  - •可设置紫外灯工作间隔时间和共用时间来监控操作过程。
  - ●控制面板位于右手侧,方便操控,手动设置风机,灯,时间,声光报警等选项。
  - ●滤过率为99.99%的HEPA滤膜或滤过率为99.999%的ULPA滤膜可供选择。
- **6** •两极、接地的电源插座设计,故障时可断电保护,不锈钢防喷溅保护盖。
  - ●全封闭的,1/4英寸厚防紫外安全玻璃悬窗,独特的玻璃悬窗 逆平衡装置,通过悬窗下部的两个拉手可轻松上下拉动玻璃 悬窗。10度倾角斜面设计的玻璃悬窗符合人体工程学,防止眩 光产生,影响操作。
- ▼ •29英寸的悬窗可视高度,工作区视野更开阔。
  - •不锈钢光滑中凹可移动盘状工作台面,易于清洗和保养。
- ●不锈钢曲面进气板设计,提供了舒适的操作角度,减少长时间操作的疲劳; Reserve-Air 二级气流设计\*,即使操作者操作不慎造成进气板局部堵塞,也会维持安全垂直层流。
  - •明亮度达 100 尺烛光。荧光灯无闪烁,荧光灯安装在工作区域以外,免于污染,易于安装。
  - •安全保密锁(可选配),通过输入密码来操作生物安全柜
  - •壹年质保期
  - ●通过 NSF(国际卫生设备生产制作标准制定及相应资格)认证 及 CE 认证





Made in U.S.A.



液压支架 3780101 配脚轮 3784000.











- 🔯 Labconco 独有特点
- \* 美国专利号No. 6,368,206
- 符合美国残疾人法标准的高度的伺服装置



## Purifier® Logic™ 系列二级生物安全柜

#### 二级生物安全柜 A2型 (30%外排,70%内循环)

<b>型号</b>	Catalog #	Nominal Width	Sash Opening	Exhaust Volume	Electrical Requirements	Power Cord & Plug	Light(s)	Service Fixture(s)
Logic 3A2	3430825	3 feet	8"	203-223 CFM	230 volts, 50 Hz, 12 amps	230 volts, 15 amps	Fluorescent Ultraviolet	1
Logic 4A2	3440825	4 feet	8"	269-296 CFM	230 volts, 50 Hz, 12 amps	230 volts, 15 amps	Fluorescent Ultraviolet	1
Logic 5A2	3450825	5 feet	8"	336-370 CFM	230 volts, 50 Hz, 12 amps	230 volts, 15 amps	Fluorescent Ultraviolet	1
Logic 6A2	3460825	6 feet	8"	403-443 CFM	230 volts, 50 Hz, 16 amps	230 volts, 20 amps	Fluorescent Ultraviolet	2

### 二级生物安全柜 B2型 (100%全外排)

型号	Catalog #	Nominal Width	Sash Opening	Exhaust Volume	Electrical Requirements	Power Cord & Plug	Light(s)	Service Fixture(s)
Logic 4B2	3441025	4 feet	8"	743-771 CFM	230 volts, 50 Hz, 12 amps	230 volts, 15 amps	Fluorescent Ultraviolet	1
Logic 6B2	3461025	6 feet	8"	1111-1151 CFM	230 volts, 50 Hz, 16 amps	230 volts, 20 amps	Fluorescent Ultraviolet	2

## Cell Logic™ 系列二级生物安全柜

新型Cell Logic生物安全柜

完全符合NSF49安全标

通过选配不同的Pure-Vu Punch目镜套件

兼容Zeiss、Nikon、Olympus、Leica等品牌显微镜产品

同时选配Stand-Still 的显微镜平台保证气流安全通畅

独特的Temp-Zone 温度控制区可在工作台面上形成0-50°C存放样品的区域











## Logic™系列二级生物安全柜选配:











Protecting your laboratory environment

**LABCONCO** 

Laptop Computer Arms 3869300

Turntable 3852000 Aspirator Pump Systems 3850301

Interior Shelf 3859000

Cord Management System 3859100

地址:北京市海淀区中关村南大街12号,天作国际中心A座705室 / 上海市浦东新区金高路2216号金桥谷创意园6号楼2层 电话: 北京: 010-82168066 /上海: 021-64393161, 64393162 传 真: 北京: 010-82168099 / 上海: 021-64393163

网址: http://www.lightace.com.cn